

The word "myReha" in white sans-serif font, centered within a blue rounded rectangular button. The button is flanked by two large, flowing blue wavy lines that extend towards the left and right edges of the page.


Digitale Therapielösung für die Praxis

Multimodal für
Logopädie, Ergotherapie
und Neuropsychologie

 CE Medizinprodukt



Höchste Datensicherheit

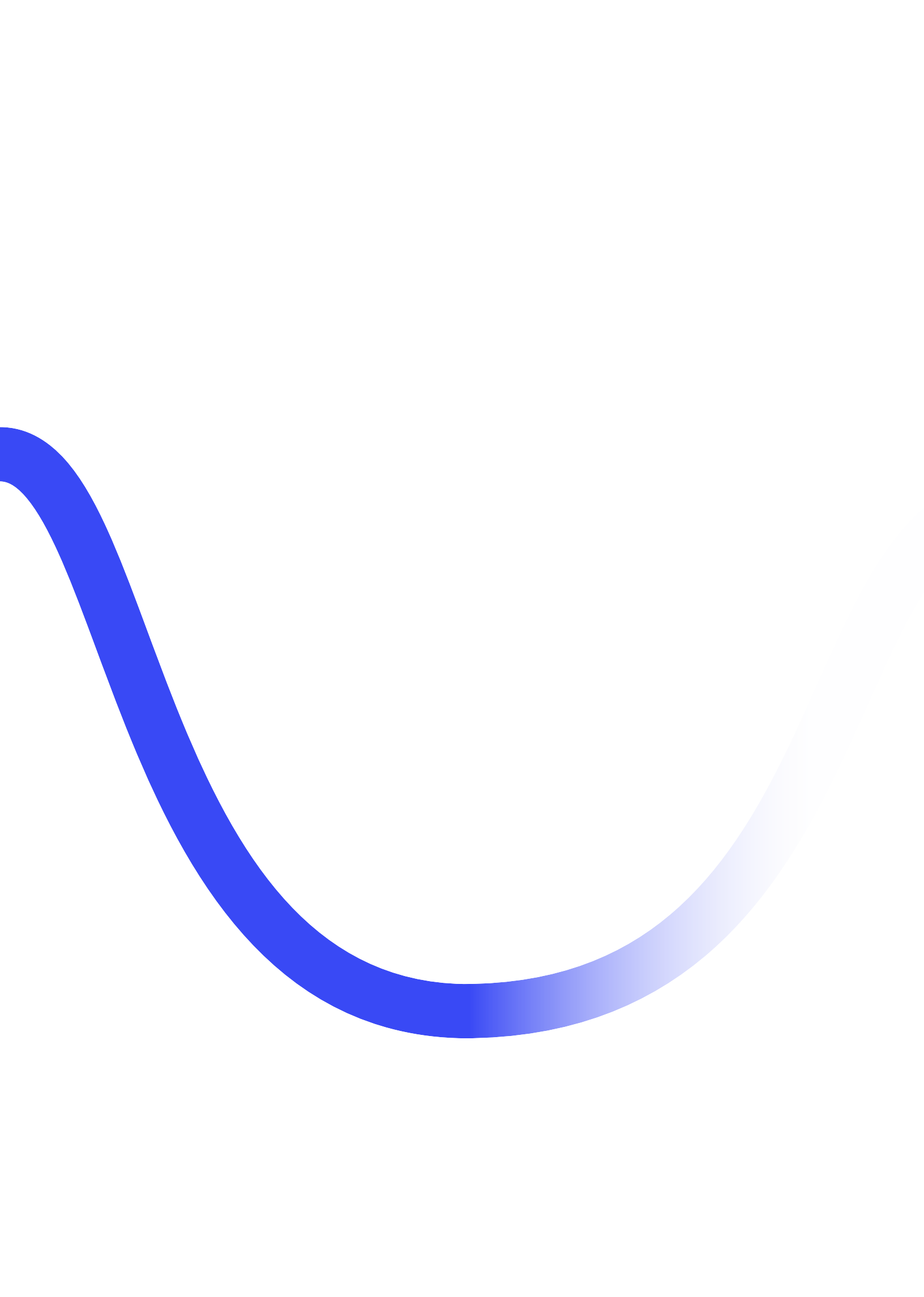

myReha Praxis-Account **Kurzanleitung**

Checklist: Was Sie benötigen

- Android oder iOS-Tablet
- Ihre Zugangsdaten (E-Mail, Passwort, Pin) – *schreiben Sie uns an support@nyra.health oder melden sich telefonisch unter +49 157 36498781, wenn Sie keine Zugangsdaten erhalten haben*

In nur 3 einfachen Schritten losstarten:



MYREHA AUF EIN MOBILES TABLET LADEN –

myReha ist für iPads und Android-Tablets verfügbar. Suchen Sie je nach Gerätehersteller im App Store oder Google Play Store nach „myReha“ und tippen Sie auf „Installieren“. Alternativ den QR-Code mit Ihrer Tablet-Kamera scannen.



IM MYREHA PRAXIS-ACCOUNT ANMELDEN – Öffnen Sie die myReha App und tippen Sie auf **„Ich habe einen Zugang“**. Geben Sie Ihre Zugangsdaten, bestehend aus E-Mail, Passwort und PIN ein, welche Sie von uns per E-Mail erhalten haben.



PATIENT:INNEN ANLEGEN UND LOSSTARTEN – Nach erfolgreicher Anmeldung sind Sie bereit, mit Ihrem myReha Praxis-Account loszustarten. Auf Seite 8 erfahren Sie, wie Patient:innen-Profile angelegt werden. **Tipp:** Zum Start kann auch ein Test-Account erstellt werden.

FERTIG! Sie sind startklar und können jetzt alle Funktionen des myReha Praxis-Accounts nutzen.

Wussten Sie schon? Viele private und gesetzliche Krankenkassen übernehmen die vollständigen Kosten für Ihre Patient:innen

Das macht myReha zum idealen Therapie-App für die Praxis und die Zeit zwischen den Therapiesitzungen. Aus über 65.000 Aufgaben für die Sprach- und Kognitionstherapie erstellt myReha automatisch einen individuellen Therapieplan. So üben Ihre Patient:innen genau das, was gerade wichtig ist – einfach, flexibel und motivierend. Ihre Patient:innen laden sich myReha dazu über den App Store bzw. Play Store herunter und melden sich mit ihren persönlichen Zugangsdaten an. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Nähere Informationen zur Kostenübernahme finden Sie unter www.nyra.health/krankenkassen-kostenuebernahme



Willkommen bei **myReha**, der innovativen Neuro-Therapielösung für Sprache und Gedächtnis.

In dieser Anleitung finden Sie die wichtigsten Informationen rund um Ihren myReha Praxis-Account. Unsere Mission ist es, Menschen in der neurologischen Reha zu unterstützen und verloren gegangene Fähigkeiten wiederherzustellen. Hinter unseren Lösungen steht ein interdisziplinäres Team aus Expert:innen der Bereiche Neurologie, Logopädie, Ergotherapie, Neuropsychologie und natürlich der Technik.

Als Therapeutin oder Therapeut spielen Sie eine zentrale Rolle bei der Rehabilitation von neurologischen Patient:innen. Mit unserer Therapiesoftware möchten wir Sie daher bei Ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen – sei es als digitales Hilfsmittel während der Therapie in Ihrer Praxis oder als innovatives Hausübungstool für Ihre Patient:innen zu Hause.

Als Expert:innen in den Bereichen Logopädie, Ergotherapie oder Neuropsychologie schätzen wir Ihre Meinung und freuen uns über Ihr Feedback und Vorschläge zu unserer Therapiesoftware, welche uns helfen, myReha weiter für Ihre Bedürfnisse zu optimieren.


Das Team von nyra health wünscht Ihnen viel Erfolg und alles Gute.



Dr. Philipp Schöllauf
Medizinisch-therapeutische Leitung

Inhaltsangabe

1. Nutzungsbedingungen	6
2. Systemanforderungen	7
3. Patient:innen hinzufügen	8
4. Aufbau der myReha Therapiesoftware	10
4.1. Ihr Praxis-Dashboard	12
4.2. Der Wochenplan Ihrer Patient:innen	13
4.3. Alle Übungen	14
4.4. Fortschritt Ihrer Patient:innen	16
4.5. Profil	17
5. Häufige Fragen & Antworten	19
6. Fragen zur Kostenübernahme	20
7. Installationsanleitung für Patient:innen	21

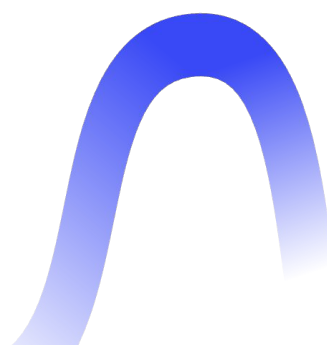

Bevor es los geht

myReha Praxis-Account - Nutzungsbedingungen

Der myReha Praxis-Account ist **ausschließlich für den Einsatz durch freiberufliche Therapeut:innen in niedergelassenen Praxen und Gruppenpraxen vorgesehen.**

Eine Nutzung des myReha Praxis-Accounts in anderen Einrichtungen oder über diesen Zweck hinaus ist nicht gestattet. Mit der Nutzung des myReha Praxis-Accounts stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu.

Systemanforderungen

Hinweis! myReha Geräte- und Systemanforderungen

Die **Praxis-Version der myReha App**, in der Sie Patient:innen-Profile anlegen und verwalten können, ist auf allen gängigen iOS- und Android-Tablets verfügbar.


Die **Patient:innen-Version** der myReha App ist jedoch auf **allen gängigen Smartphones und Tablets** (iOS und Android) verfügbar. **Anmeldung und Funktionsweise sind auf beiden Gerätetypen identisch.**

- Für **Apple Smartphones oder Tablets** brauchen Sie mindestens iOS Version 16.0, um die App erfolgreich installieren zu können.
- Für **Android Smartphones oder Tablets** benötigen Sie Version 6
- **Tipp:** Erscheint die myReha-App im App Store oder Google Play Store, so ist Ihr Gerät mit myReha kompatibel.

Die nachfolgenden Abbildungen in der Praxis-Account Anleitung zeigen die Tablet-Version der myReha App.

Patient:innen hinzufügen


Nach einer erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie in Ihr **Praxis-Dashboard**. Hier können Sie neue Patient:innen anlegen, verwalten und zwischen bestehenden Patient:innen wechseln. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Patient:innen:

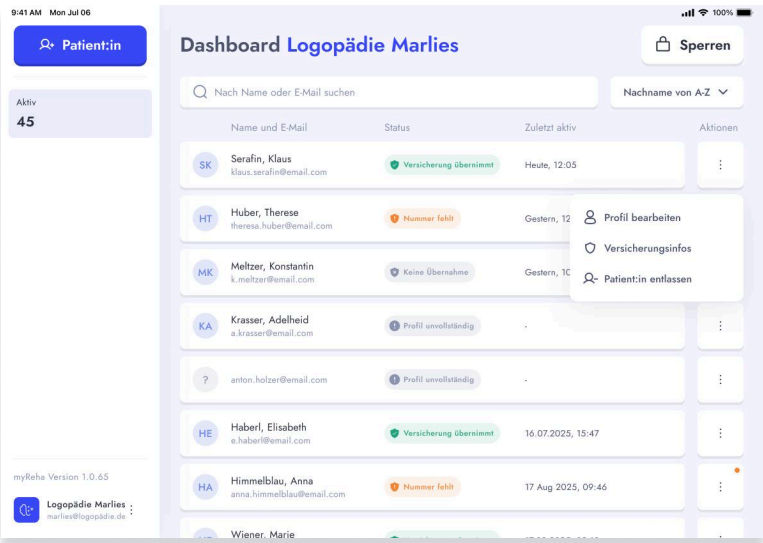

Patient:innen hinzufügen:

Um neue Patient:innen anzulegen, tippen Sie am linken oberen Bildschirmrand auf **“Patient:in”**.


Über das **Aktion-Panel** können Sie bestehende Profile direkt bearbeiten und Stammdaten wie die E-Mail-Adresse oder Versicherung aktualisieren.

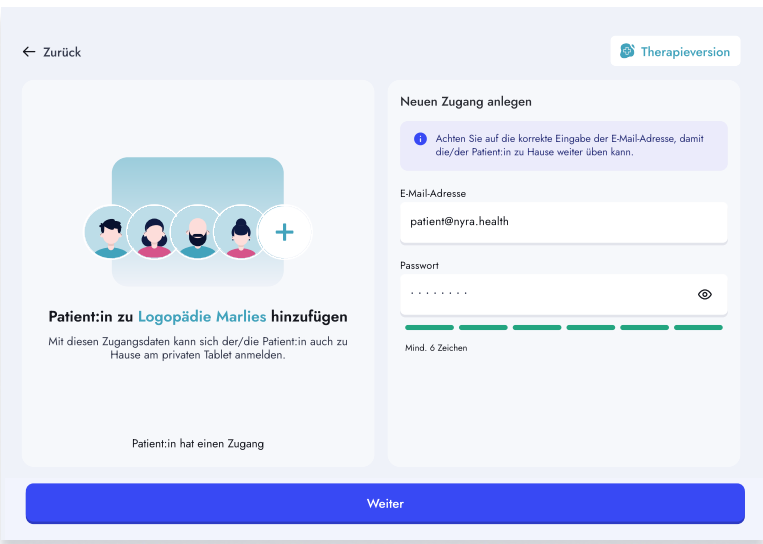

Patient:innen-Zugang erstellen:

Hat Ihre Patient:in bereits einen myReha Account, tippen Sie auf **“Patient:in hat einen Zugang”** und geben Sie die E-Mail sowie das Passwort an.

Um einen neuen Zugang anzulegen geben Sie die private E-Mail-Adresse Ihrer Patient:in an und wählen Sie ein Passwort.

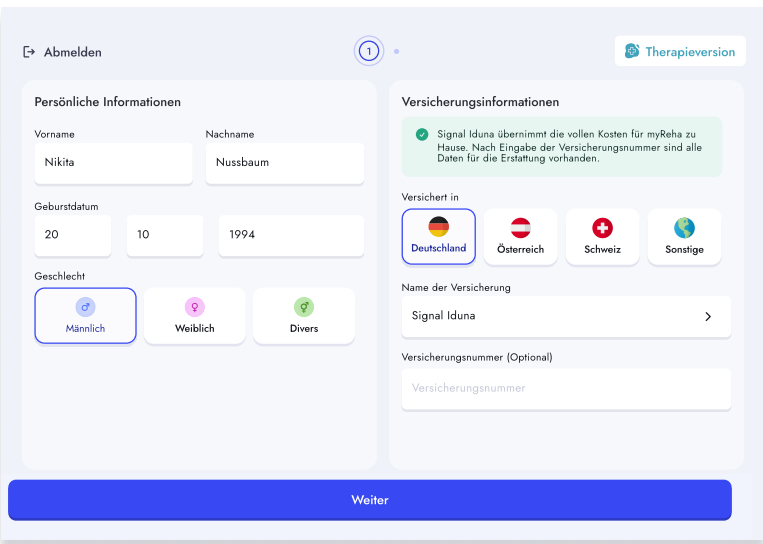

Patient:innen-Daten angeben:

Vervollständigen Sie das Profil, indem Sie alle erforderlichen Daten wie Vor- und Nachname, das Geschlecht, Geburtsdatum und Versicherung angeben. Wenn die Versicherung die Kosten für die Therapie mit myReha übernimmt, erscheint ein Hinweis. Geben Sie die Versicherungsnummer an.

Patient:innen hinzufügen

Nachdem Sie das Profil Ihrer Patienten:innen angelegt haben, werden Sie nach der Diagnose und den aktuellen sprachlichen bzw. kognitiven Kompetenzen gefragt. Diese Daten dienen zur Erstellung des ersten Wochenplans.

Diagnosen hinzufügen:

Tippen Sie auf **“Neue Diagnose hinzufügen”**, wählen Sie aus der Liste der neurologischen Erkrankungen und geben Sie alle relevanten Details zur Diagnose an.

Aktuelle Fähigkeiten angeben:

Sie haben die Möglichkeit, ein Standardprofil basierend auf zwei einfachen Fragen anzulegen oder die aktuellen Sprach- und Kognitionsfähigkeiten genau zu erfassen. Wir empfehlen, mit der genauen Angabe der aktuellen Sprach- und Kognitionsfähigkeiten fortzufahren.

Willkommen, Maximilian!

Wir haben Ihnen einen Wochenplan aus **4 Kategorien** und **12 Übungen** zusammengestellt.

Viel Spaß beim Üben!

Wochenplan anpassenLos geht's (empfohlen)

Los geht's mit dem Wochenplan:

Sie haben erfolgreich eine neue Patient:in hinzugefügt. Basierend auf Ihren Angaben hat myReha einen individuellen Therapieplan für Ihre Patient:innen erstellt, und Sie können direkt losstarten. Tippen Sie auf **“Los geht's”**, um in den Wochenplan zu gelangen.

Aufbau der myReha Therapiesoftware



Aufbau der myReha Therapiesoftware

The screenshot shows the 'Therapiemodus' (Therapy Mode) interface. At the top right is a 'Therapiemodus' header with a plus icon. Below it, a section titled 'Ihr Plan für heute' (Your plan for today) shows '(1/16 Übungen fertig)' (1/16 exercises finished). A list of seven exercises follows: 'Begriffe nennen' (with a green checkmark), 'Muster merken', 'Muster erkennen', 'Puzzlemaster', 'Objekte ausschließen', 'Wörter erkennen I', and 'Sätze lesen'. Each exercise has a corresponding icon and a progress indicator. A blue 'starten' button is at the bottom left. At the bottom, there are two tabs: 'Fortschritt' (Progress) and 'Profil' (Profile). Callouts with blue circles and lines point to specific elements: one to the first exercise 'Begriffe nennen', one to the 'starten' button, one to the 'Fortschritt' tab, and one to the 'Profil' tab.

Therapiemodus

Ihr Plan für heute
(1/16 Übungen fertig)

- Begriffe nennen ✓
- Muster merken
- Muster erkennen
- Puzzlemaster
- Objekte ausschließen
- Wörter erkennen I
- Sätze lesen

starten

Fortschritt **Profil**

Starten Sie mit einer Übung aus dem Tagesplan

Starten Sie hier in den täglichen Therapieplan.

Im Profil können die Einstellungen Ihrer Patient:innen sowie der Wochenplan und die Trainingsintensität angepasst werden.

Die Fortschrittsanzeige gibt Ihnen einen Überblick über die Erfolge Ihrer Patient:innen in den einzelnen Therapiedomänen.

Aufbau der myReha Therapiesoftware


Die myReha Therapiesoftware ist klar strukturiert.

Es gibt fünf Bereiche in der myReha Therapiesoftware:

1. Ihr Praxis-Dashboard
2. Der Wochenplan Ihrer Patient:innen
3. Alle Übungen
4. Fortschritt Ihrer Patient:innen
5. Profil

1. Ihr Praxis-Dashboard

Sobald Sie sich mit Ihren Zugangsdaten erfolgreich in Ihrem myReha-Praxis-Account anmelden, gelangen Sie direkt in Ihr **Praxis-Dashboard**. Dieser Bereich dient Ihnen zum Anlegen und Verwalten Ihrer Patient:innen. Darüber hinaus sehen Sie, wie viele aktive Patient:innen Sie in Ihrem Praxis-Account aktuell haben und wie intensiv diese mit myReha trainieren.

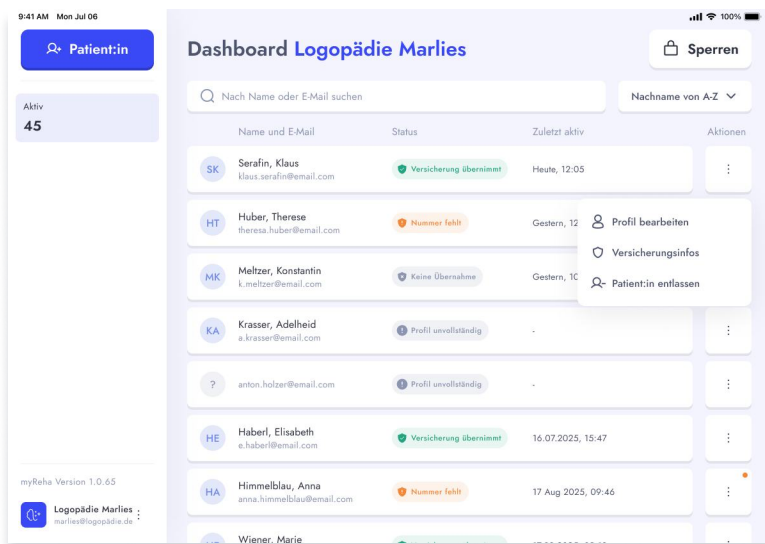

Tippen Sie auf **"Patient:in"**, um neue Patient:innen anzulegen (siehe Seite 7).

Tippen Sie auf eine **bestehende Patient:in**, um in den Wochenplan dieser Patient:in zu gelangen.

Tippen Sie auf die drei Punkte am rechten Bildschirmrand, um eine **bestehende Patient:in zu entfernen**.

Wir fahren mit dem persönlichen Wochenplan Ihrer Patient:innen fort.

Aufbau der myReha Therapiesoftware


2. Der Wochenplan Ihrer Patient:innen

Der Wochenplan ist der persönliche Übungsplan Ihrer Patient:innen. Hier finden Sie und Ihre Patient:innen jeden Tag die Übungen, die auf ihre aktuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Außerdem erhalten Sie hier einen ersten Überblick über die aktuelle Übungsintensität und den Fortschritt Ihrer Patient:innen.

Ein Training durchführen


Der persönliche Wochenplan Ihrer Patient:innen wurde basierend auf den Angaben während der Registrierung erstellt. Er passt sich automatisch und laufend an den Fortschritt Ihrer Patient:innen an und muss daher nicht manuell von Ihnen aktualisiert werden. Sollten Sie jedoch beispielsweise andere Trainingsschwerpunkte setzen wollen, so können Sie den Therapieplan Ihrer Patient:innen dennoch jederzeit in den Einstellungen anpassen (siehe Seite 17).

Der Wochenplan bietet die bequemste Möglichkeit, um mit Ihren Patient:innen in der Praxis zu üben. Zusätzlich können Ihre Patient:innen die myReha Therapiesoftware individuell von zu Hause aus nutzen und an die Therapie in der Praxis anknüpfen. Damit wird myReha zum innovativen Hausübungstool, und Sie haben als Therapeut:in den Fortschritt Ihrer Patient:innen immer im Blick."

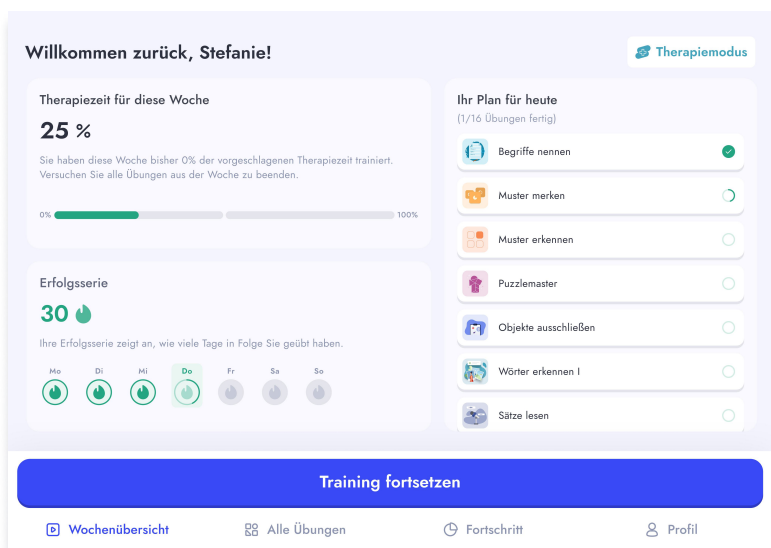


Tippen Sie auf den blauen Button **"Training fortsetzen"**, um mit dem Training loszustarten.

Es öffnet sich nun die Übersicht des heutigen Tagesplans.

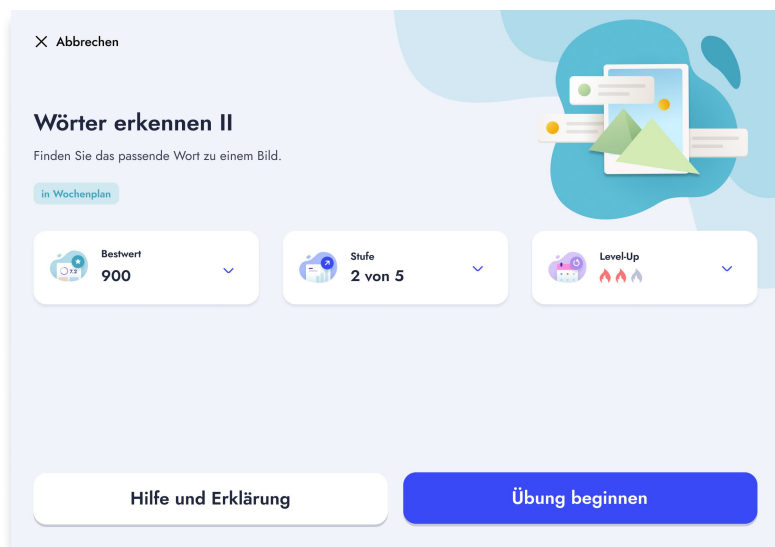

Das heutige Training startet, sobald Sie auf den blauen Button **„Übung beginnen“** tippen.

Wollen Sie zunächst eine genaue Übungsanleitung aufrufen, tippen Sie auf den weißen Button **„Hilfe und Erklärung“**.

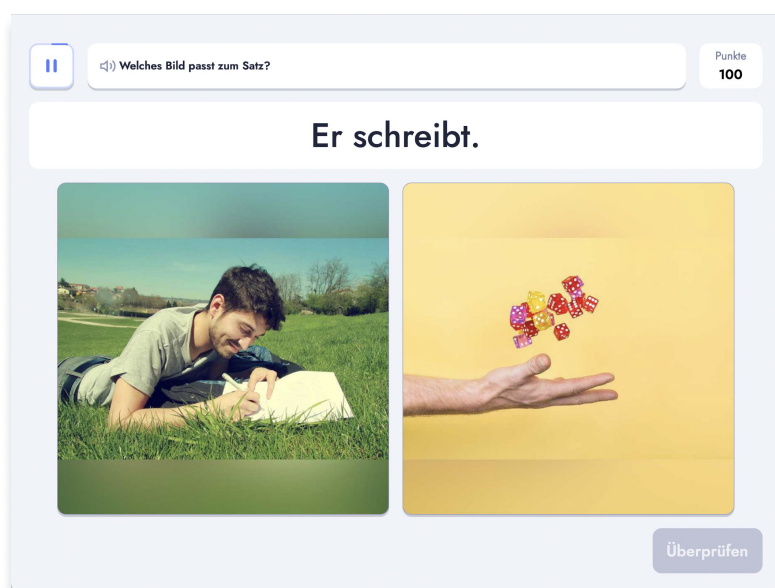


Es öffnet sich die erste Übung und Sie können direkt loslegen.

Ist die Übung fertig, werden Sie automatisch zur nächsten Übung weitergeleitet. Sie können sich Schritt für Schritt gemeinsam mit Ihren Patient:innen durch den persönlichen Therapieplan arbeiten, indem Sie jede Übung nacheinander absolvieren.

3. Alle Übungen

Neben dem Wochenplan stehen Ihnen jederzeit auch sämtliche anderen Übungen des myReha Therapiesystems zur Verfügung. Unten in der Leiste finden Sie den Bereich **„Alle Übungen“**. Hier gelangen Sie zu einer Übersicht, in der sämtliche Übungen nach Therapiebereichen geordnet aufgeführt sind.

Sie können auf eine Übung tippen und gelangen so zur Übersicht der ausgewählten Übung. Mit einem Klick auf **„Übung beginnen“** können Sie jede Übung frei und zusätzlich mit Ihren Patient:innen durchführen.

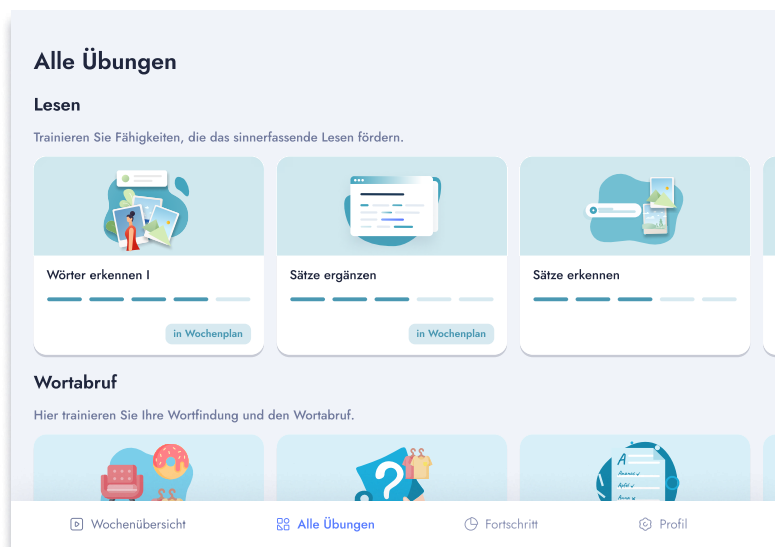

Scrollen Sie nach unten, um die verschiedenen Domänen zu sehen. Hier können Sie alle Übungen, auch jene, die nicht im individuellen Therapieplan vorgeschlagen wurden, durch einfaches Antippen starten.


4. Fortschritt Ihrer Patient:innen

Um den Fortschritt Ihrer Patient:innen einzusehen, tippen Sie in der Wochenplan-Ansicht auf **“Fortschritt”**. Hier finden Sie einige Kerninformationen über Ihre Patient:innen, wie beispielsweise die durchschnittliche Trainingszeit pro Woche.


Die Daten, die Sie in diesem Bereich der myReha Therapiesoftware finden, sollen Ihnen einen Einblick in den Fortschritt Ihrer Patient:innen geben und Ihnen helfen zu verstehen, wie Sie den Therapieplan gegebenenfalls anpassen sollten, um die individuellen Defizite Ihrer Patient:innen bestmöglich zu fördern.




Zunächst öffnet sich eine allgemeine Übersicht, die Details zum Therapiebeginn, zur gesamten Übungszeit und zur wöchentlichen Übungszeit enthält.

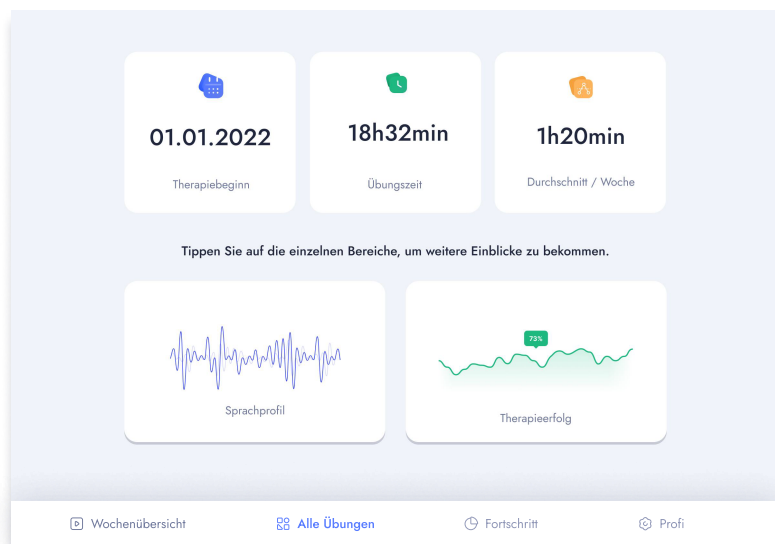

Wenn Sie weiter nach unten scrollen, gelangen Sie zum Sprachprofil und zum Therapieerfolg.

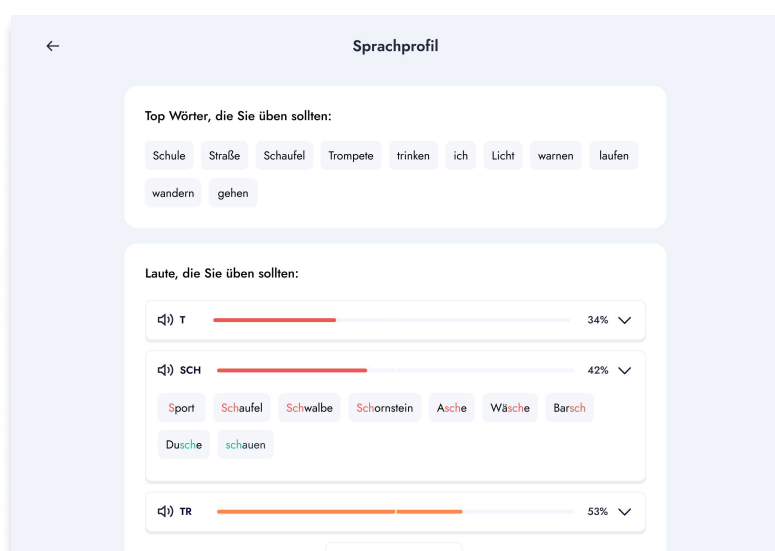

Wenn Sie auf **“Sprachprofil”** tippen, erhalten Sie Einblicke darüber, welche Wörter und Laute in der Therapie verstärkt geübt werden sollten und welche bereits gut funktionieren.

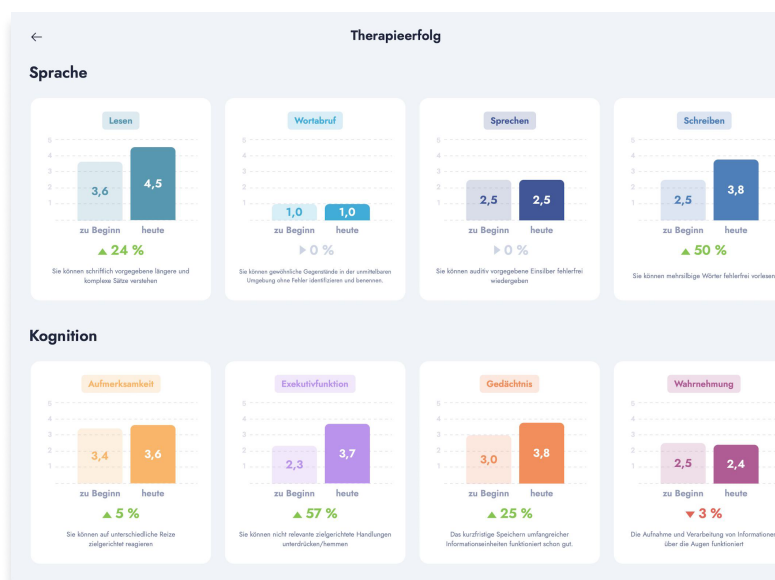


Wechseln Sie zum **“Therapieerfolg”**, um zu sehen, wie sich die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten Ihrer Patient:innen seit Beginn der Therapie bereits verbessert haben.

5. Profil

Unter dem Punkt **“Profil”** können Sie myReha auf Ihre und auf die Bedürfnisse Ihrer Patient:innen anpassen. Obwohl sich der Therapieplan Ihrer Patient:innen laufend und automatisch anpasst, haben Sie hier die Möglichkeit, den Therapieplan Ihrer Patient:innen jederzeit manuell anzupassen, wenn Sie beispielsweise andere Trainingsschwerpunkte setzen möchten.

Übersicht

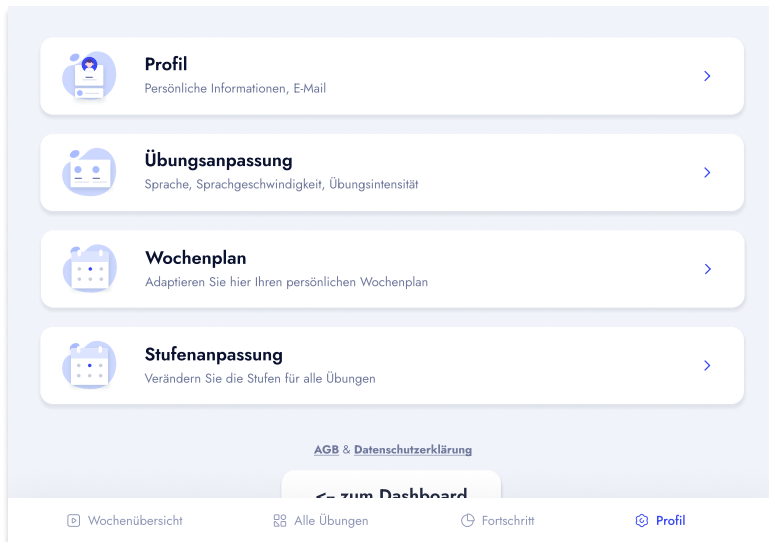


In der Übersicht gelangen Sie zum Profil Ihrer Patient:innen, zu den Übungsanpassungen, zur Anpassung des Wochenplans und erhalten Informationen über die derzeitige myReha Version.

Wenn Sie auf **“zum Dashboard”** tippen, kehren Sie zurück in Ihr Praxis-Dashboard.

Profil

In den 'Profil'-Einstellungen können Sie den angezeigten Namen oder das Passwort gemeinsam mit Ihren Patient:innen ändern. Hier finden Sie auch den **“Passwort vergessen?”** Button. Wenn Sie darauf tippen, wird Ihrer Patient:in eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen des Passworts zugesendet.


Übungsanpassung

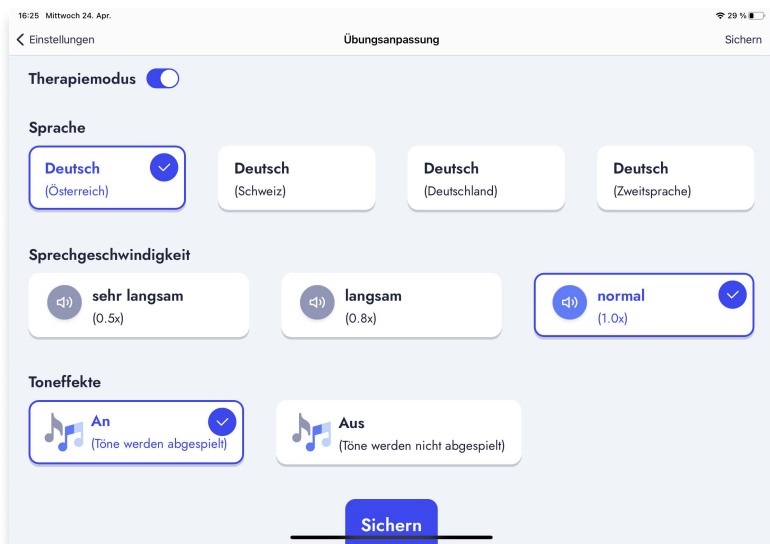

Sie sehen, dass der **Therapiemodus** aktiviert ist. Dies ist notwendig, um den Wochenplan Ihrer Patient:innen im Detail anpassen zu können (siehe Wochenplan Einstellungen).

In den Übungsanpassungen können Sie neben der Sprache auch die Sprechgeschwindigkeit wählen sowie die Toneffekte ein- bzw. ausschalten.

Wochenplan Einstellungen

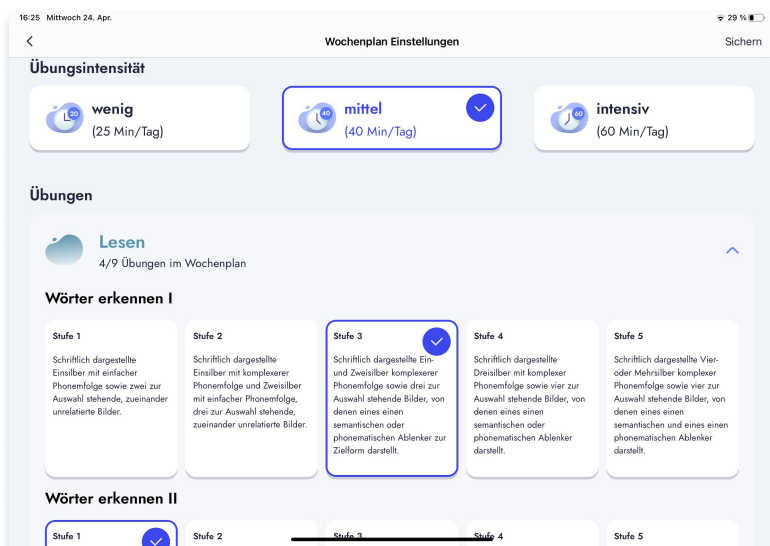

Hier können Sie die Übungsintensität, also das tägliche Trainingsziel Ihrer Patient:innen, neu definieren. Die Detailansicht bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, festzulegen, welche Übungen in den Wochenplan aufgenommen oder daraus entfernt werden sollen. Legen Sie je nach den individuellen Bedürfnissen Ihrer Patient:innen die Schwierigkeitsstufe fest und speichern Sie Ihre Änderungen.

Gut zu wissen:

Beachten Sie, dass Änderungen den Verlauf des vorgeschlagenen Wochenplans beeinflussen können.

Häufige Fragen & Antworten

Kann myReha auch auf einem Smartphone oder PC genutzt werden?

Patient:innen können myReha am Smartphone oder Tablet nutzen. Die Praxis-Version der myReha App ist für Tablets verfügbar. Siehe Seite 7.

Wieso muss beim Anlegen jeder Patient:in eine E-Mail-Adresse angegeben werden?

Eine E-Mail-Adresse ist erforderlich, um Funktionen wie die Passwort-Wiederherstellung zu ermöglichen. Darüber hinaus können Patient:innen auch nach der Therapie in Ihrer Praxis weiterhin mit ihrem eigenen Account üben und so myReha als Ihr innovatives Hausübungstool nutzen.

Können meine Patient:innen myReha auch individuell zu Hause nutzen?

Ja. Es ist empfohlen, myReha ergänzend zur Therapie in Ihrer Praxis zu nutzen, damit Patient:innen ihr Training zu Hause fortsetzen und eine hohe Übungsintensität aufrechterhalten können.

Ihre Patient:innen können myReha sechs Monate kostenlos über unsere Partner-Krankenkassen nutzen. Ein Hinweis zur Kostenübernahme erscheint beim Anlegen neuer Patient:innen-Profile in Ihrer Praxis. Alternativ bieten wir einen Rabatt von 50% auf alle regulären myReha-Angebote im Google Play und Apple App Store. Diesen Rabatt erhalten Ihre Patient:innen mit einem Rabatt-Code für Ihre Praxis.

In welchen Sprachen ist die myReha App verfügbar?

myReha ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Dank der KI-basierten Sprachanalyse können auch Nutzer:innen mit lokalen Dialekten mit myReha üben.

Wie sicher ist die Nutzung von myReha und was passiert mit den Daten?

myReha ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt. Diese Produkte müssen eine strenge Prüfung zu den medizinischen Inhalten und Datenschutzvorgaben durchlaufen. Entsprechend der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden die Daten von Nutzer:innen sicher verwahrt und nur auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert.

Sie haben weitere Fragen?

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf unserer Website im Menu **“Anleitungen & Hilfe”** (<https://www.nyra.health/hilfe-und-anleitung>). Zusätzlich können Sie uns jederzeit per E-Mail unter support@nyra.health kontaktieren.

Fragen zur Kostenübernahme

Mit welchen Zugangsdaten melden sich meine Patient:innen an?

Patient:innen werden im Praxis-Account immer mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort angelegt. Mit diesen Zugangsdaten haben sie die Möglichkeit, ihr Profil auf ihrem privaten Smartphone oder Tablet aufzurufen. So können sie die Therapie zwischen den Praxiseinheiten zu Hause fortsetzen.

Was müssen Patient:innen zu Hause tun, um myReha kostenlos zu nutzen?

Patient:innen laden myReha auf ihr privates Gerät und melden sich mit ihren Zugangsdaten an. Bei der ersten Anmeldung werden die Versicherungsdaten (Krankenkasse und Versichertennummer) abgefragt. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten, werden die Patient:innen direkt über die Kostenzusage informiert und können starten.

- **Ausnahme Techniker Krankenkasse:** Einschreibung auf "Meine TK" und ärztl. Bestätigung erforderlich. Vorlage: [nyra.health/tk](https://www.nyra.health/tk)
- **Ausnahme Private Krankenkassen:** Patient:innen starten direkt mit myReha. Rechnung zur Erstattung kommt per E-Mail. Bei der Krankenkasse einreichen.
- Ablauf kann je nach Krankenkasse abweichen – Schritt-für-Schritt Anleitung in der App folgen.

Alternativ besteht die Möglichkeit myReha über den 50% Praxis-Rabatt-Code vergünstigt zu nutzen.

Welche Krankenkassen übernehmen die Kosten?

Viele gesetzliche und private Krankenkassen übernehmen bereits automatisch die Kosten für myReha – für einen Zeitraum von 6 Monaten mit Option auf Verlängerung:

- **Kostenübernahme-Check:** Die Kostenübernahme kann direkt in der myReha App oder auf www.nyra.health geprüft werden.

Was passiert, wenn eine Kostenübernahme ausläuft?

Der myReha-Therapieplan bleibt im Profil weiter einsehbar, allerdings wird der Service auf eine limitierte Version herabgestuft. Patient:innen haben jedoch die Möglichkeit, die vollständige Premium-Version von myReha über ihre Krankenkasse zu verlängern oder als Selbstzahler zu erwerben.



Installationsanleitung für Ihre Patient:innen

CHECKLISTE FÜR ZUHAUSE


- ✓ Zugangsdaten aus der Praxis
- ✓ Internetzugang
- ✓ Android- oder iOS-Tablet oder -Smartphone



App Store
(auf Apple Geräten)



Play Store
(auf Android Geräten)

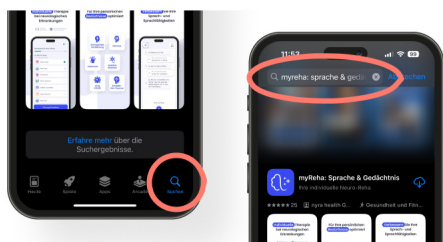


SCHRITT 1

Öffnen Sie den **App Store** oder **Play Store App** auf ihrem Tablet oder Smartphone

SCHRITT 2

Geben Sie „**myReha**“ in das **Suchfeld** ein
(Üblicherweise mit Lupen-Symbol – Ansicht kann variieren)

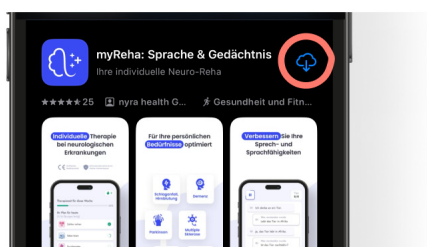


SCHRITT 3

Tippen Sie auf den „**Laden**“/„**Installieren**“ Button, um myReha herunterzuladen.

Sie erkennen die myReha App am blauen Gehirn-Symbol und dem Namen „myReha: Sprache & Gedächtnis“.



myReha

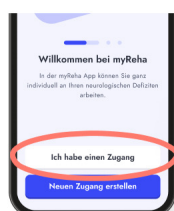

Ich habe einen Zugang

SCHRITT 4

Öffnen Sie die myReha App (dafür auf das blaue App-Symbol tippen) und tippen Sie links unten auf „**Ich habe einen Zugang**“.




Anmelden

SCHRITT 5

Geben Sie jetzt Ihre Zugangsdaten (E-Mail & Passwort) ein und tippen Sie auf „**Anmelden**“.

Wichtig: Verwenden Sie Ihre Zugangsdaten aus der Praxis!

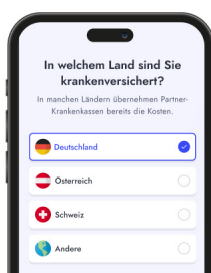


Name der Versicherung

Versicherung auswählen >

SCHRITT 6

Fast geschafft! Möglicherweise werden Sie noch gebeten, Ihre Versicherungsdaten zu bestätigen. Bitte tragen Sie diese ein, und wir prüfen sofort, ob Ihre Krankenkasse die Kosten für myReha übernimmt.

Bei Fragen: Schreiben Sie uns an support@nyra.health.

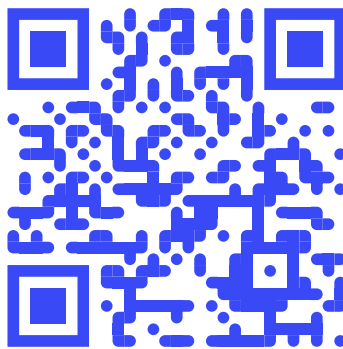

www.nyra.health
support@nyra.health

CE Medizinprodukt



Höchste Datensicherheit